


Instrucciones finales

1. SleepView® está preprogramado para encenderse y apagarse en su horario normal para dormir. Si decide irse a dormir más temprano, presione el botón ON (encendido) ubicado en la parte delantera de SleepView®. La luz de encendido debe prenderse de color verde.
2. Las luces de cada sensor conectado deben ser verdes, lo cual indica que se está registrando una señal fuerte. Si una luz se prende de color ámbar, se debe acomodar el sensor. Si una luz se prende de color rojo, el sensor no está correctamente conectado a SleepView®. Acomode los sensores hasta que la luz de cada sensor conectado cambie a verde. **Si no está utilizando un sensor de la luz permanecerá apagada.**
3. Las luces de los sensores se apagarán después de 90 segundos, pero la luz de encendido permanecerá encendida. Si necesita más tiempo para acomodar los sensores, presione el botón ON (encendido) nuevamente para encender todas las luces de los sensores durante otros 30 segundos.
4. Duerma en la posición que le resulte más normal y cómoda. Cuando se despierte a la mañana, retire suavemente los sensores. Nota: Se debe desenroscar la cánula para poder retirarla.
5. Cuando el Monitor SleepView este apagado, el monitor hará una prueba automática para determinar si el estudio de sueño fue grabado satisfactoriamente. Al final del estudio, si al despertar el Monitor SleepView ya esta apagado, presione el botón verde de encender (ON) y luego deje presionado el botón rojo OFF (apagar) por unos segundos hasta que las luces comenzaran a girar parpadeando en círculos. Si las luces giran verde parpadeando en dirección a las manecillas del reloj el estudio fue grabado exitosamente. Si las luces giran en rojo en sentido contrario a las manecillas del reloj, llame a su doctor para confirmar si es necesario que se repita la prueba del sueño la siguiente noche.
6. Si la prueba fue grabada exitosamente por su monitor, retire la cánula de respiración del monitor desenroscando hacia la izquierda. Regrese el Monitor SleepView a la oficina de su doctor.



Si no está utilizando un sensor de la luz permanecerá apagada.

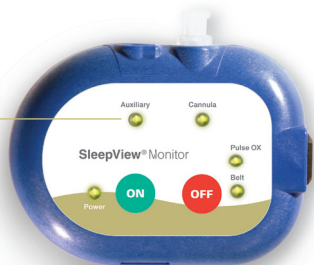

La colocación incorrecta de las sondas puede producir riesgo de asfixia. No lo use conjuntamente con un desfibrilador externo. Comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica si tiene algún problema con el monitor SleepView® o con sus accesorios.

396-0004-4 Rev E DCO 1253

SleepView® Monitor

Cómo usar SleepView®



CleveMed

Cleveland Medical Devices Inc.

Cinturón de esfuerzo



Cánula nasal




Oxímetro de pulso

PASO 1

Cinturón de esfuerzo

Verifique que ambos broches del cinturón de esfuerzo se abrochen firmemente al monitor SleepView®.

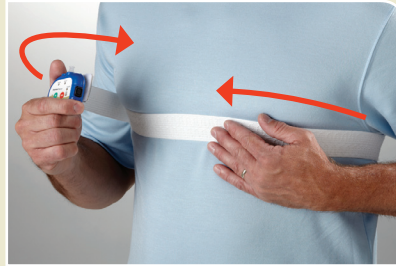

Coloque el cinturón alrededor del pecho sujetándolo con las lengüetas de velcro de manera firme pero cómoda.



Coloque el cinturón por encima de la línea del pecho para que SleepView® quede ubicado en el centro del pecho.


SleepView® Monitor

En ClevelandSleepview.com, encontrará un video instructivo titulado How to Use SleepView® (Cómo usar SleepView®).

PASO 2

Cánula nasal

Retire la cánula nasal de su envoltorio plástico.

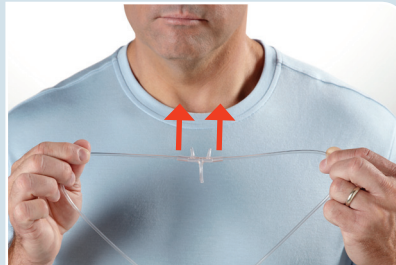

Sostenga la cánula nasal con ambas manos de manera tal que las puntas nasales apunten hacia la nariz.



Introduzca las puntas nasales en la nariz. Coloque las mangueras detrás de las orejas. Empuje la corredera de plástico hacia arriba para ajustar las mangueras de la cánula a la altura del mentón.




Retire el protector de plástico del extremo de la cánula nasal y enrosque el extremo de la cánula en sentido horario en el conector de la cánula de SleepView® hasta que quede ajustado.

PASO 3

Oxímetro de pulso

Verifique que el sensor del oxímetro de pulso ya se encuentra conectado a SleepView®. Puede pasar el cable a través del cuello de su camisa de manera tal que salga por la manga.

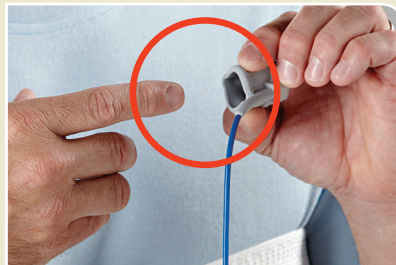

Coloque el dedo índice de cualquier mano dentro del sensor de manera tal que el símbolo del dedo quede encima de la uña.



Cierre el puño y, luego, sujete el cable a la parte posterior de la mano con un trozo de cinta adhesiva microporosa.

Comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica si tiene algún problema con el monitor SleepView® o con sus accesorios.

Consulte las instrucciones finales que se encuentran en el reverso.